


IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Nombre: | Pack de litotomía o parto |
| Marca: | Cranberry. |
| Material: | Tela con 5 capas de SMMMS. |
| Color: | Azul. |
| Tamaño: | Ver especificaciones del producto. |
| Presentación: | Paquete individual. Caja x 8 pack. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------------------|
| Función: | Pack apto para usar en todo procedimiento que utilice la posición de litotomía. Por las características de este tipo de intervenciones es de gran importancia la impermeabilidad, resistencia física y barrera al paso de virus y bacterias que ofrezca el tejido de este pack. El tejido esta constituido por 5 capas, 2 de ellos ofrecen impermeabilidad y 3 evitan el paso de virus y bacterias. Es llamado un tejido con tela SMMMS. Usado en cirugías urológicas, ginecológicas, coloproctológicas y parto. Nuestro paquete contiene 15 piezas: 1 cubierta mesa arsenalera con refuerzo, 1 cubierta mesa mayo con refuerzo, 1 campo subgluteal reforzado con bolsa recolectora de fluidos, 1 bata quirúrgica reforzada talla XL SMMMS con 1 toalla de mano, 1 bata quirúrgica estándar talla L SMMMS con 1 toalla de mano, 4 toallas de mano, 2 pierneras, 1 cinta OP, 1 manta de bebé, 1 paño adhesivo con refuerzo central y 1 bolsa de sutura. | | |
| Libre de Látex: | Sí. | Estéril: | Sí, en óxido de etileno. |
| Método de esterilización: | El pack de litotomía o parto cuenta con dos virajes, un círculo externo que vira de color rosa a azul. Y una cinta de viraje interno que cambia de rosa a azul, una vez sometido al método de esterilización. | | |
| Vigencia: | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. | | |
| Almacenamiento: | Lugar fresco y seco a temperatura entre 5° y 35° C. | | |
| Uso: | Producto desechable para un solo uso. No reutilizar. Importante: No usar si el empaque está abierto o deteriorado. | | |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--|
| Suave: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Resistente: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Adaptable: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |
| Hipoalergénico: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Respirable: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> | Impermeable: | Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> |

- Insumo de textura lisa estéril, no deja hilachas ni pelusas.
- Pack resistente al rasgado y la fricción.
- El campo subgluteal permite la recolección de fluidos, reduciendo al mínimo el riesgo de contacto con fluidos de alto riesgo para el personal de salud, los equipos y el piso del pabellón, asegurando la esterilidad del procedimiento y la limpieza del lugar.
- Los dos delantales estériles permiten vestir a dos cirujanos o, al cirujano y su arsenalera.

CERTIFICACIONES

Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- Certificado FDA.
- EC certificate 93/42/EEC.

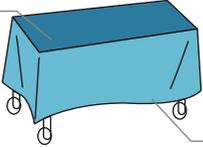
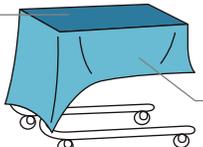
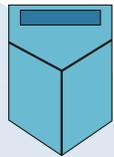
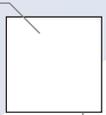
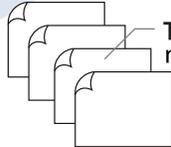
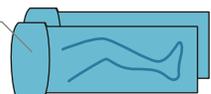
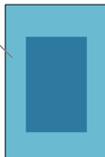
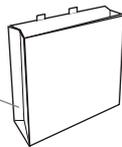
| ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Código Interno | Contenido del Pack | Tamaño | Descripción Gráfica |
| AAPACK01 | 1 cubierta mesa arsenalera PE polietileno con refuerzo | Cubierta 140 x 190 cm Refuerzo 60 x 190 cm | Refuerzo  Cubierta |
| | 1 cubierta mesa mayo PE polietileno con refuerzo | Cubierta 80 x 140 cm Refuerzo 45 x 55 cm | Refuerzo  Cubierta |
| | 1 bata quirúrgica reforzada XL SMMMS 40 gr con 1 toalla de mano blanca. 1 bata quirúrgica talla L SMMMS 40 gr con 1 toalla de mano blanco. | Batas XL: 145 x 160 cm L: 135 x 150 cm Toalla 30 x 40 cm | Talla XL 40 gr  Talla L 40 gr  Blanca Blanca |
| | 1 campo subgluteal con refuerzo + bolsa recolectora de fluidos | Campo 100 x 110 cm Bolsa 50 cm x 50 cm |  |
| | 1 manta de bebé blanca 4 toallas de mano blanco. | Manta 75 x 75 cm Toallas 30 x 40 cm | Manta de bebé  Blanca  Toallas manos |
| | 2 piñeras SMMMS 40 gr 1 cinta OP azul | Piñeras 74 x 122 cm Cinta 10 x 50 cm | 40 gr   Azul |
| | 1 paño adhesivo SMMMS 40 gr con refuerzo central 1 bolsa papel para suturas | Paño adhesivo 100 x 152 cm Bolsa 10 x 38 cm | Con refuerzo central 40 gr  Blanca  |

ILUSTRACIÓN TESTIGO DE VIRAJE

| Externo | | Interno | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| No virado. | virado. | Indicator bar turns blue after sterilized Class 4 | Contrast color |
| | | No virado. | virado. |

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL SMS

Este material proviene del polipropileno, es un tejido no tejido compuesto por cinco capas. Los dos exteriores llamados Spunbond confieren una gran impermeabilidad a los líquidos y protección ante el rasgado. Las tres capas interiores de Meltblown constituyen una eficaz barrera de protección bacteriológica y viral.

CÓMO SE OBTIENE SMS

Este tejido no tejido se obtiene mediante un proceso de adhesión térmica de cinco láminas, los dos exteriores con tecnología Spunbond y las tres internas con tecnología Meltblown. Las cinco capas están estructuradas por un polímero de polipropileno al cual se le inyectan grandes cantidades de aire a temperatura elevada y a gran velocidad para atenuar los filamentos. Cuando una densa capa aglomerada de polipropileno es sometida a este proceso, se obtienen láminas de SMMMS.

ESQUEMA DE SMMMS

